


PULSETTO

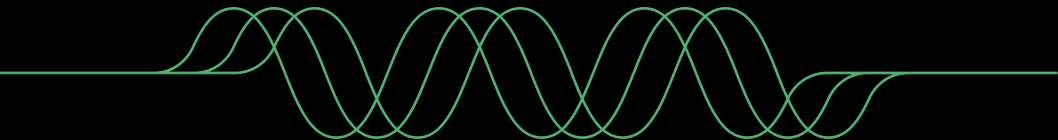

GO WITH THE WAVE

OBSAH

5	Náš příběh	13	Další bezpečnostní informace
8	Začínáme	14	Manipulace s produktem
10	Wellness aplikace a popis produktu	15	Řešení problémů
12	Jak může Pulsetto podpořit vaši duševní pohodu	15	Likvidace produktu
13	Co můžete při používání Pulsetto počítovat	16	Popis produktu
13	Kdy nepoužívat Pulsetto	16	Zásady vrácení zboží a záruka
13	Bezpečnostní upozornění	18	Premium verze aplikace

OBJEVTE SÍLU PULSETTO

Není potřeba žádná předchozí zkušenost s mindfulness nebo meditací. Přínosy pro vaši pohodu se při pravidelném používání postupně kumulují a účinky můžete pocítit již při prvním použití zařízení Pulsetto.

NÁŠ PŘÍBĚH

Cílem Pulsetto je podporovat odolnost vůči stresu a celkovou pohodu lidí ze všech oblastí života prostřednictvím využití účinných metod a nejmodernějších technologií.

Po desetiletích zkoumání toho, jak stres ovlivňuje každodenní život, jsme vytvořili Pulsetto – jednoduché, neinvazivní wellness zařízení, které podporuje relaxaci, kvalitnější spánek a celkovou duševní pohodu.



Jsmeme malý tým, který usilovně pracuje na tom, aby se Pulsetto dostalo k co největšímu počtu lidí. Vaši podpory a pomoci si velmi vážíme, proto s námi zůstaňte v kontaktu nebo nám zanechte 5hvězdičkové hodnocení v App Store či Google Play, pokud si své sezení s Pulsetto užíváte.



Jak se připravit?
Využijte své sezení naplno

6

1

Vyhradte si nerušený čas – postačí i pouhých 10 až 15 minut.

2

Abyste se vyhnuli upozorněním, přepněte telefon do režimu spánku nebo režimu Nerušit.

3

Nasaďte si Pulsetto na krk a upravte velikost tak, aby pevně drželo na svém místě.

4

Ujistěte se, že je zapnuté Bluetooth, spusťte sezení pomocí aplikace a relaxujte...

Co můžete očekávat po sezení?

I když Pulsetto funguje již od prvního sezení, dlouhodobé účinky se postupně kumulují a mohou se u jednotlivých lidí lišit. Po dokončení sezení se pohybujte pomalu a opatrně, protože pracujete na své lepší verzi. Pulsetto působí na každého jinak, nejčastěji však lidé popisují tyto dlouhodobé výsledky:

1

zlepšení délky a kvality spánku

2

podpora relaxace a vyrovnané nálady

3

zvýšená odolnost vůči stresu

4

podpora regenerace po každodenním stresu

7

Doporučujeme zachovat otevřenou mysl – dejte nám vědět, jaké změny během používání pozorujete. Rádi si vyslechneme vaše zkušenosti.

Podělte se o své postřehy zde:



ZAČÍNÁME



Pomocí chytrého telefonu vyhledejte v App Store (iOS) nebo Google Play (Android) aplikaci „Pulsetto“ a nainstalujte ji.

Naskenujte kód pro stažení aplikace. Po dokončení stahování aplikaci otevřete a postupujte podle pokynů pro dokončení nastavení.

1. Ujistěte se, že je na vašem telefonu zapnuté Bluetooth a služby určování polohy a že se telefon nachází v blízkosti zařízení Pulsetto.

2. Prohlédněte si prosím návod a postupujte podle pokynů v aplikaci.

3. Zaregistrujte se v aplikaci. Pokud ji používáte poprvé, budete se muset v aplikaci Pulsetto zaregistrovat, abyste se stali členem komunity Pulser.

4. Při prvním přihlášení se zobrazí úvodní zpráva s návodem. Později je můžete najít na stránce „Nastavení“ v sekci „Návod“.

5. Odstraňte veškeré šperky, které by se mohli dotýkat místa aplikace během sezení.

6. Najděte si pohodlnou polohu vsedě. (Může vám pomoci místo, kde si budete moci prohlédnout krk v zrcadle.)


7. Ujistěte se, že je oblast aplikace čistá a suchá.

8. Naneste gel na oblast krku. Aplikujte jej na obě strany.

9. Umístěte zařízení Pulsetto na krk a zkontrolujte, zda kontaktní polštářky odpovídají oblastem, kam jste nanesli gel. Pokud gel není aplikován podle uvedených pokynů, může být sezení méně pohodlné nebo méně účinné.

10. Zapněte Pulsetto stisknutím tlačítka napájení na zařízení. Kolem tlačítka se rozsvítí zelená LED kontrolka.

11. Dostupné programy uvidíte na úvodní obrazovce. Více informací najdete na stránce „Nastavení“.

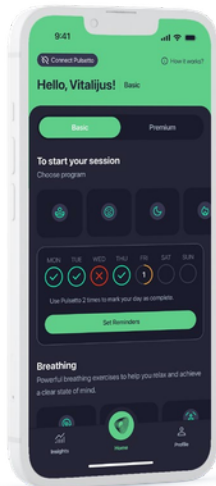

12. Umístěte zařízení na správné místo na krku nad oblast aplikace. Upravte velikost límce tak, aby byl vyvíjen mírný až střední tlak a zařízení dobře přiléhalo ke kůži. Nepoužívejte však na krk nadměrný tlak.

13. Aplikace Pulsetto obsahuje také zvukovou knihovnu – zvukové scénérie jsou navrženy výhradně pro Pulsetto a využívají harmonické frekvence v kombinaci se sluchovými podněty a reakcemi mozku na frekvence. Pulsetto průběžně přidává nové funkce a možnosti přímo do aplikace, aniž by bylo nutné kupovat nový hardware.


Tyto funkce se obvykle používají v delších programech – vyberte je podle programu, který vám nejvíce vyhovuje.

14. Vyberte program. Na obrazovce programu se zobrazí další pokyny.

15. V aplikaci postupně zvyšujte intenzitu na úroveň, která je pro vás příjemná. Jakmile najdete své preferované nastavení, jednoduše si užijte zbytek svého sezení. Můžete zaznamenat jemné pocity nebo lehké záškuby v oblasti, kde zařízení přiléhá – je to normální a po ukončení sezení odezní.

Správná intenzita se liší u každého člověka a může se lišit také při jednotlivých sezeních.

16. Po dokončení sezení budete mít možnost ohodnotit své sezení a zobrazit jeho podrobnosti. Všechny tyto informace najdete ve svém profilu. Pomůže nám to také vytvářet lepší uživatelské prostředí.

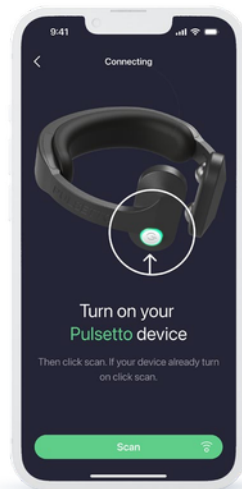

POZNÁMKA: Ve svém profilu můžete kdykoli zkontrolovat předchozí sezení a nastavení, včetně používaných programů.

POZNÁMKA: Jemné záskuby krčních svalů během sezení jsou normální a nejsou důvodem k ukončení sezení. Pokud je pocit příliš intenzivní nebo nepříjemný, zkuste:

- Snížete úroveň intenzity stisknutím tlačítka „-“.
- Znovu umístíte Pulsetto na krk nad oblast pulzu a pomalu zvyšujete intenzitu opětovným stisknutím horní části ovládacího tlačítka.
- Pokud pocit zůstává nepříjemný, vypněte zařízení stisknutím a podržením tlačítka napájení a ukončete sezení.
- Sejměte Pulsetto z krku.

Vyčistěte Pulsetto otřením zbytků gelu z kontaktních ploch pomocí měkkého suchého hadříku.

Jemně setřete přebytečný gel hadříkem nebo ubrouskem. Pro větší pohodlí nenechávejte gel na pokožce, protože by mohl v některých případech způsobit mírné podráždění.

Prozkoumání aplikace – porozumění zvuku

Pulsetto nabízí pečlivě vybranou kolekci hudebních zvukových scénérií, které si uživatelé mohou zdarma zvolit prostřednictvím aplikace. Tyto zvukové stopy byly pečlivě vybrány a sestaveny naším specializovaným týmem tak, aby co nejlépe odpovídaly vaší aktuální náladě nebo individuálním

potřebám. Pro prozkoumání této rozmanité knihovny klikněte na možnost „Vybrat hudbu“ a projděte si množství dostupných skladeb. Úroveň hlasitosti lze upravit pomocí hlasitosti telefonu.

Poutavý zážitek s Pulsetto je výsledkem jedinečně navrženého hudebního systému, který umožňuje současný poslech prostřednictvím sluchátek.

Náš tým využívá speciální zvukovou kombinaci zahrnující čtyři důvěrné prvky, díky kterým vytváří podmanivý a harmonický zvukový zážitek. Tento pohlcující zvukový zážitek je synchronizován napříč celým slyšitelným spektrem a zvyšuje kvalitu vaší interakce s naší platformou.

APLIKACE PRO WELLNESS A POPIS PRODUKTU

Pulsetto wellness nositelné zařízení lze použít pro:



Snížení
stresu



Podpora
relaxace



Podpora
klidného
spánku

Pulsetto poskytuje jemné signály v oblasti krku navržené tak, aby podporovaly relaxaci, snižování stresu a kvalitnější spánek.

V závislosti na zvoleném programu trvá každé sezení s Pulsetto 4–20 minut. Délka sezení se liší podle vybraného programu. Vždy můžete přidat několik dalších minut.

Uživatel ovládá úroveň intenzity i délku sezení.

Nyní je Pulsetto Fit dostupné ve 3 velikostech, aby vyhovovalo každému typu postavy a individuálním preferencím:

- **Velikost L** – zařízení se bez podložek
- **Velikost M** – se středně velkými podložkami
- **Velikost S** – s většími podložkami

Vyvinuli jsme dvě varianty měkkých podložek pro zvýšení pohodlí a flexibility používání. Jsou navrženy tak, aby snižovaly tlakové body a přirozeně přiléhaly k pokožce. Nové podložky zajišťují bezpečné a individuálně přizpůsobené používání. Díky magnetickému systému uchycení je výměna podložek jednoduchá a plynulá.

Tato zvýšená přizpůsobitelnost zajišťuje **pevné a komfortní uchycení na míru**, čímž zlepšuje pohodlí při používání i celkový uživatelský zážitek. **Integrovaný magnetický systém** umožňuje snadné nasazení a sejmутí podložek a nabízí tak praktické a uživatelsky přívětivé řešení pro každodenní používání.

Vlastnosti zařízení	Popis / Použití
1. Tlačítko napájení	Zapíná a vypíná zařízení
2. Nabíjecí port	Nabíjí zařízení
3. Kontaktní polštářky	Kontaktní body pro přenos signálu
4. Měkké podložky	Magnetické uchycení pro nastavení optimálního přizpůsobení



Symbols LED displeje:

LED indikátor

-  Zařízení se spouští / je připraveno k použití (Modré světlo svítí)
-  Zařízení je připraveno k párování (Zelené světlo svítí)
-  Sezení bylo zahájeno. (Blikající fialové světlo)
-  Nabíjení (Červené světlo svítí)

Tlačítko napájení:

Stisknutím tlačítka napájení ❶

zařízení zapnete.

Podržení tlačítka napájení ❶

zařízení vypnete.

Pokyny k nabíjení:

1. Zapojte USB-C kabel do nabíjecího portu zařízení ❷. Druhý konec USB-C kabelu připojte k napájecímu zdroji s minimálním požadavkem 0,5 A.

2. LED indikátor zařízení bude během nabíjení svítit ČERVENĚ. Červené světlo neznamena úplné nabití. Vaše zařízení Pulsetto se plně nabije za 1 hodinu.

Čištění:

Po každém použití zařízení vyčistěte jemným otřením kontaktních polštářků pro krk ❸ měkkým suchým hadříkem, abyste odstranili zbytky gelu.

JAK MŮŽE PULSETTO PODPOŘIT VAŠI POHODU

- Podporuje relaxaci a zvládání stresu
 - Pomáhá navodit pocit klidu a celkové pohody
 - Pomáhá podporovat lepší spánkové návyky
 - Podporuje soustředění, duševní jasnost a rovnováhu
 - Může doplňovat praktiky mindfulness, meditace a dechová cvičení
 - Osobní použití, nositelné zařízení, přenosné provedení, snadné začlenění do každodenního života
 - Poskytuje neinvazivní způsob, jak podpořit celkovou odolnost organismu a zdravý životní styl.
- POZNÁMKA! Toto zařízení je obecným wellness produktem. Nejedná se o zdravotnický prostředek a není určeno k diagnostice, léčbě, vyléčení ani prevenci jakéhokoli onemocnění nebo zdravotního stavu.**



CO MŮŽETE PŘI POUŽÍVÁNÍ PULSETTO POCIŤOVAT

Co můžete pociťovat:

- Můžete pociťovat mírné brnění, pocit tepla nebo lehké záškuby svalů v místě kontaktu se zařízením.

- V místě, kde se zařízení dotýká pokožky, se může dočasně objevit zarudnutí.
- Tyto pocity jsou běžné, obvykle

krátkodobé a po skončení sezení odezní.

- Pokud byste kdykoli pociťovali přetrvávající nepohodlí, přestaňte zařízení používat.

KDY PULSETTO NEPOUŽÍVAT

Pulsetto je navrženo jako produkt pro podporu celkové pohody (wellness). Aby bylo jeho používání bezpečné a pohodlné, nepoužívejte jej, pokud:

- Máte implantované elektronické zařízení, například kardiostimulátor nebo sluchový implantát.
- Máte kovové implantáty v oblasti krku.

- Máte porušenou, podrážděnou pokožku nebo vyrážku v oblasti krku.
- Nacházíte se ve vodě nebo v její blízkosti (např. sprcha, vana, bazén).

13

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Používejte Pulsetto pouze způsobem popsáným v tomto návodu.

- Uchovávejte mimo dosah dětí.

- Nepoužívejte při řízení, obsluze strojů ani při činnostech vyžadujících plnou pozornost.

- Vždy používejte vodivý gel podle

pokynů pro zajištění pohodlí při používání.

- Pokud zaznamenáte závrať, točení hlavy nebo nepohodlí, ukončete sezení.

DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pulsetto je určeno pouze pro účely obecného wellness, jako je podpora zvládání stresu, relaxace a kvalitnějšího spánku.

Nejčastějšími pocity jsou pouze dočasné brnění, mírné zarudnutí

nebo lehké záškuby svalů v místě kontaktu zařízení s pokožkou

Pulsetto není zdravotnický prostředek a není určeno k diagnostice, léčbě, vyléčení ani prevenci jakéhokoliv onemocnění.

Pokud byste někdy pociťovali neobvyklé nebo přetrvávající nepohodlí, přestaňte zařízení používat a kontaktujte náš tým zákaznické podpory.

MANIPULACE S PRODUKTEM



Naskenujte QR kód a zjistíte více o zařízení Pulsetto a o tom, jak začít.

PROVOZNÍ PODMÍNKY:

Teplotní rozsah: 10 °C až 45 °C

Vlhkost: 10 % až 90 %

Atmosférický tlak: 80 až 101 kPa

Nadmořská výška: Používejte pod 2000 m n. m.

Maximální výstup: 30 V (špičková hodnota),

40 mA (špičková hodnota)

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVY:

Pulsetto skladujte při pokojové teplotě a chraňte jej před vlhkostí.

Teplotní rozsah: 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)

Vlhkost: 10 % až 90 %

Atmosférický tlak: 80 až 101 kPa

14

PÉČE O KONTAKTNÍ POLŠTÁŘKY:

Upozorňujeme, že měkké polstrování je **spotřební součástí**. Přestože je vyrobeno z kvalitních materiálů a navrženo tak, aby dlouho vydrželo, může se při častém nebo intenzivním používání přirozeně opotřebovat. Faktory, jako je tlak, vlhkost, tření a opakované nasazování či odstraňování, mohou postupně ovlivnit tvar nebo povrchovou strukturu polstrování. Jedná se o běžný důsledek pravidelného používání a nejedná se o vadu výrobku. V případě potřeby polstrování vyměňte.

Náhradní polstrování bude možné zakoupit na našich oficiálních webových stránkách a prostřednictvím autorizovaných prodejních kanálů.

Pro prodloužení životnosti dodržujte pečlivě všechny pokyny k péči a manipulaci.

Pokyny k praní

- Perte pouze ručně ve studené vodě (max. 30 °C / 86 °F).
- Používejte jemné mýdlo – nepoužívejte bělidla ani agresivní chemické prostředky.
- Zacházejte opatrně – vyvarujte se

kroucení, drhnutí nebo namáčení.

- Důkladně opláchněte, aby se odstranily všechny zbytky mýdla.

Pokyny pro sušení a péči

- Neperte v pračce ani nesaďte do sušičky.
- Nechte volně uschnout položené na rovné ploše – nekrutě, nezavěšujte ani nevystavujte zdrojům tepla.
- Uchovávejte mimo dosah tepla a otevřeného ohně.
- Nežehlete ani nečistěte chemicky.

Zacházejte s výrobkem šetrně, aby si zachoval svůj tvar a funkčnost.

POPIS PRODUKTU

Pulsetto je zařízení využívající komunikaci Bluetooth Low Energy, napájené interní dobíjecí baterií LiPo s kapacitou 350 mAh a napětím 3,7 V. Zařízení se nabíjí prostřednictvím konektoru USB-C. Pulsetto je vybaveno jedním tlačítkem pro zapnutí a vypnutí.

Hlavní ovládání probíhá prostřednictvím vyhrazené aplikace pro chytrý telefon. Zařízení obsahuje interní DC-DC měnič napětí, který vytváří impulzy s délkou periody 0,2 ms, napětím 12–46 Vp-p a pracovním cyklem 50 %. Vysílá 5 impulzů, které se opakují každých 15 ms. Parametry se mohou lišit v závislosti na konkrétním programu.

Zařízení obsahuje jednu integrovanou keramickou anténu se ziskem 0,5 dBi a vysílač s nastaveným vysílacím výkonem 0 dBm. Zařízení funguje jako „systém využívající digitální modulační technologie“. Šířka pásma jednoho kanálu je 1 MHz, provozní frekvenční rozsah je 2402–2480 MHz.

ZÁSADY VRÁCENÍ A ZÁRUKA

16

Pokud z jakéhokoli důvodu nejste se svým nákupem spokojeni, můžete objednávku vrátit do 21 až 30 dnů od data doručení a získat plnou refundaci. Upozorňujeme, že bude vrácena cena produktu a příslušné daně. Náklady na dopravu se nevracejí, pokud nedošlo k chybě z naší strany nebo pokud není zboží považováno za vadné.

Vrácení zboží nebude přijato, pokud nastane některá z následujících situací:

1. Výrobek neobsahuje všechny součásti nebo byl poškozen v důsledku nesprávného používání.
2. Výrobek byl poškozen nebo upraven oproti svému původnímu stavu způsobem, který neodpovídá běžnému používání.

3. Výrobek není vrácen se všemi součástmi a příslušenstvím.

4. Po uplynutí třiceti dnů od data doručení nebude poskytnuta žádná refundace.

5. Všechny vrácené produkty musí být v původním, nezměněném obalu.



Shoda se základními požadavky byla prokázána na základě následujících harmonizovaných norem:






Odkaz na harmonizovanou normu	Článek směrnice 2014/53/EU	Číslo zkušebního protokolu
EN 62368-1:2014/A11:2017	Ochrana zdraví a bezpečnost – článek 3.1(a)	PUL-202403/S01-V1
EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-3 V2.1.1	Elektromagnetická kompatibilita – článek 3.1(b)	PUL-202403/E01-V1
EN 300 440 V2.2.1	Efektivní využití rádiového spektra – článek 3.2	PUL-202403/R01-V1

PREMIUM VERZE APLIKACE

Sekce PREMIUM v aplikaci Pulsetto představuje vrchol našeho závazku k celostní péči o duševní pohodu a každodenní rovnováhu. Je navržena pro uživatele, kteří hledají hlubší a komplexnější přístup k relaxaci a celkové pohodě.

PREMIUM nabízí rozšířený zážitek s funkcemi, jako jsou vedené meditační seance, rozsáhlá knihovna 54 dechových cvičení a 1200 účinných afirmací. Tyto prvky lze snadno kombinovat se sezeními Pulsetto a naší knihovnou uklidňujících zvukových kulís. Prémiové funkce zahrnují další vedené meditace, dechová cvičení a afirmace navržené tak, aby podpořily a obohatily zážitek z relaxace.

Sekce PREMIUM se navíc neustále vyvíjí – průběžně jsou přidávány nové funkce a vylepšení, které uživatelům pomáhají na jejich cestě k relaxaci a celkové pohodě. Díky integraci těchto funkcí se PREMIUM mění v aplikaci Pulsetto v univerzální nástroj pro budování rovnováhy, odolnosti a hlubšího pocitu celkové životní pohody.

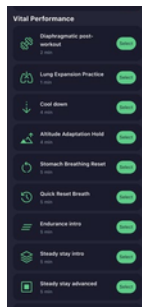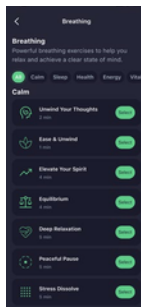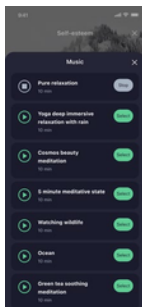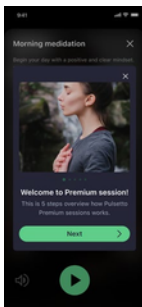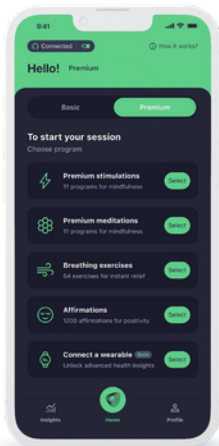

UPOZORNĚNÍ:

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC.

Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a*
- (2) toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.*

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.


L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et*
- (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.*

UPOZORNĚNÍ:

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Pulsetto, mohou vést ke ztrátě oprávnění FCC k provozu tohoto zařízení.

UPOZORNĚNÍ! *Toto zařízení je výrobek určený pro obecnou podporu wellness. Nejedná se o zdravotnický prostředek a není určeno k diagnostice, léčbě, vyléčení ani prevenci žádného onemocnění nebo zdravotního stavu.*

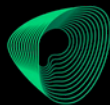

PULSETTO

GO WITH THE WAVE

Naskenujte a sledujte:



Zpráva
našeho
CEO



Jak
používat
PULSETTO